

Nicefeel Ağız Duşu Cihazı Satın Aldığınız İçin Teşekkür Ederiz.

Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip öncü ve yenilikçi markası Nicefeel'den portatif ağız duşu satın aldığınız için teşekkür ederiz. yüksek basınçlı su titreşim teknolojisi. Geleneksel diş fırçaları ağız boşluğunda saklanan yemek artıklarını kolayca çıkaramazken çoğu diş ipi diş etinin altında yalnızca sınırlı bir alana ulaşabilir. Buna karşılık, Nicefeel ağız duşları, mükemmel hijyen sağlamak için diş etlerinin derinliklerindeki ve dişlerin arasındaki yemek artıklarını hızlı ve etkili bir şekilde temizleyebilir.

İthalatçı:

NICEPRO GIDA TEKS.İNŞ.KUR.HİZ.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

Adress: ALLEBEN MAH. ÇAL SK. NO: 16/A Şahinbey/
GAZİANTEP /TÜRKİYE

Phone: 903427770708 Fax: 903427770708 Web Sitesi:
www.nicepro.com.tr

E-Post: trade@nicepro.com.tr

Vergi N. : 1780688220/ GAZİKENT

Fly Cat Electrical Co.,Ltd.

Bldg 28th, Rm.101- 401 and Bldg 30th,Rm.101,301&401,Long-
wangmiao Industrial Park,Baishixia East Community,Fuyong
Street,Bao'an District, Shenzhen,Guangdong,China

Tel: (86)0755-2729-8495 Fax: 0755-2727-3346

Website: www.fly-cat.com.cn




Nicefeel®

Taşınabilir Ağız Duşu

Kullanım Kılavuzu

Model: FC1596

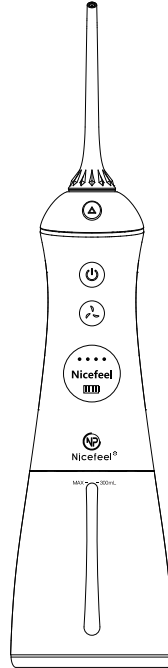

Nicefeel Ağız Duşunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz!
Daha hijyenik bir yaşamaya doğru ilerliyorsunuz!

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Elektrikli ürünleri kullanırken, özellikle de çocukların yanındayken, aşağıdakilerde temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

TEHLİKELER-Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

1. Duş esnasında kullanmayın
2. Ürünü düşebileceği veya duş kabinine, lavaboya çekilebileceği yerlere koymayın veya saklamayın.
3. Suya veya başka bir sıvıya koymayın ve düşürmeyin.
4. Suya düşen ürüne dokunmayın. Derhal fişini çekin.
5. Şarj sırasında şarj cihazını ıslak elinizle tutmayın.

UYARI- Elektrik çarpması, yangın veya kişilerin yaralanması riskini azaltmak için.

1. Bir ürün fişe takılıyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
2. Bu ürün çocuklar veya engelli kişiler tarafından kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
3. Bu ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlanan kullanımı için kullanın. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen eklentileri kullanmayın..
4. Kablosu veya fişi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse veya suya düşmüşse bu ürünü asla çalıştırmayın. Ürünü inceleme ve onarım için bir servis merkezine gönderin.
5. Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
6. Ürünün hava deliklerini asla kapatmayın veya hava açıklıklarının tıkanabileceği yatak, kanepa gibi yumuşak bir yüzeye yerleştirmeyin. ürünün açıklıklarını tüy, saç ve benzeri maddelerden uzak tutun.
7. Uyurken veya uykuluyken asla kullanmayın.

8. Hiçbir açıklığa veya hortuma asla herhangi bir nesne sokmayın.
9. Doldurmadan önce bu ürünün fişini prizden çekin. Aksi belirtilmedikçe (hazneyi) yalnızca suyla doldurun, Aşırı doldurmayın (veya doldurma talimatlarını okuyun).
10. Bu cihaz fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan (çocuklar dahil) kişiler tarafından kullanmaya tasarlanmamıştır.
- Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmediği sürece.
11. Çocukların cihazı kullanmalarını sağlamak için gözetim altında bulundurulmalıdır.
12. Aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijen verilen yerlerde kullanmayın veya çalıştırmayın.
13. Bu ürünün üretici tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj edilmesi gerekmektedir, belirtilmeyen şarj cihazını veya başka bir şarj cihazını kullanmayın.

14. Şarj cihazı üzerinde belirtilen voltaj sisteminden farklı bir voltaj sistemine takmayın.
15. Yalnızca cihazın üzerindeki işarete uygun, güvenli, ekstra düşük voltajla beslenmelidir.
16. Bu cihaz değiştirilemeyen piller içermektedir.
17. Yalnızca evde kullanım içindir. Ürünü açık havada KULLANMAYIN.


BU TALİMATLARI KAYDEDİN

Kılavuz İçindekileri

Güvenlik uyarısı ve FCC Beyanı	01-02
Güvenlik önlemleri	03-04
İçindekiler Tablosu	05
I. Kutu İçerikleri	06
II. Aksesuarlar ve Özellikler	07-08
III. Adımlar	08-12
IV. Temizlik ve Bakım	12-13
V. Çevresel koruma	13
VI. Sorun giderme	14
VII. Tehlikeli maddeler	15
VIII. Satış sonrası servisler	16

Bu kılavuzun içeriğinde herhangi bir yazım hatası veya yanlış anlama olması durumunda son yorumlama hakkını saklı tutuyoruz. Cihaz yükseltmeleri ve güncellemeleri, önceden haber verilmeden kılavuzun yeni bir sürümüne dahil edilecektir. Ürünün görünümü ve rengi ambalajlı modele bağlıdır ve bu kılavuzda yer alan açıklamalara ilişkin resimlerden önceliklidir.

I. Kutu İçerikleri

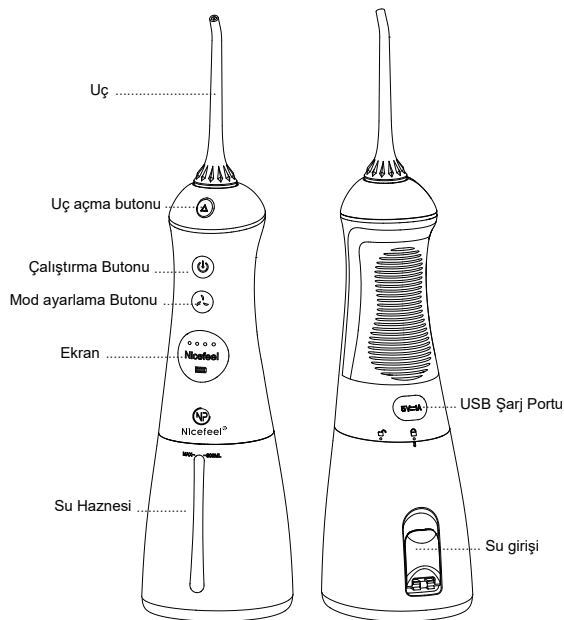

II. Aksesuarlar ve Özellikler

Ürün Aksesuarları:



Uç x2



Güç kablosu x1


Aksesuarlar satodan satın alınabilir


Ürün Özellikleri:


Ürün Adı		Nicefeel Ağız Duşu
Ağız Duşu	Model No.	FC1596
	Voltaj Değeri	3.7V ===
	Güç Değeri	5W
	Su geçirmezlik seviyesi	IPX7
	Şarj Süresi	2H~3H
	Giriş Güç değeri	5V===1A
	Adaptör değerlendirilmesi	Input: 100~240V~50/60Hz 0.3A Output: 5V===1A 5.0W
Menşei		Çin

Talimatlar:

Nicefeel ağız duşu bu parçalar içerir: 2 standart Uç , 1 Diş teli ucu ve 1 diş plağı ucu. Ek uçları (başlık) satın almak istiyorsanız Nicefeel resmi web sitesini veya yetkili satıcıyı ziyaret edin.

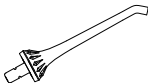Her 6 ayda değiştirilmeli	
Standart Uç	Uygulama
	Normal Temizleme

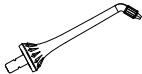Her 3 ayda değiştirilmeli	
Diş teli ucu	Uygulama
	Diş telli ağız temizleme

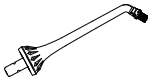Diş plağı (tartar) ucu	Uygulama
	Diş implantları, Köprüler, Kaplamalar, temizleme ucu

Diş eti temizleme ucu	Uygulama
	Diş eti, diş teli temizleme


Dil Kazıyıcı	Uygulama
	Dil temizleme

III. Kullanma Tarifi

Başlamadan Önce: Çok Önemli! USB kablosunu şarj bağlantı noktasına bağlayıp gücü açarak, ilk kez kullanmadan önce cihazın tamamen şarj olduğundan emin olun. Bu cihaz şarja takılıyken kullanılamaz.

1.Adım : Su Deposunu Doldurun

Su deposu kapağını açın ve içine su dökün. Kapak düşerse kapağı tutunuz açıklığı açın ve "tık" sesi duyana kadar aşağı doğru bastırın

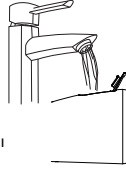

Not: Su haznesini doldurmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.



2.Adım : Başlığı takın

Başlığı ürünün üst kısmındaki deliğe yerleştirin. Başarılı kuruluma bir "tık" sesi duymalısınız. Su çıkış yönünü ayarlamak için memeyi döndürün. başlığı değiştirmeniz gerekiyorsa kaldırma düğmesini basılı tutun, ardından Çıkarın çıkarın.




Uç Takma



Uç Değiştirme

3.Adım : Mod seç

Bu cihazın 6 modu vardır. Cihaz kapalıyken mod düğmesine dokunarak istediğiniz modu seçin. Her modun işlevleri aşağıda özetlenmiştir.

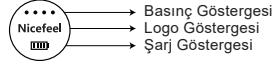

Basınç 1: sürekli olarak 1 mavi nokta ve beyaz bir logo ile gösterilir. Su basıncı 10-40 PSI'dir.

Basınç 2: 2 mavi nokta ve sarı bir logonun sürekli görüntülenmesiyle gösterilir. Su basıncı 30-60 PSI'dir.

Basınç 3: 3 mavi noktanın ve mavi logonun sürekli görüntülenmesiyle gösterilir. Su basıncı 50-90 PSI'dir.

Basınç 4: 4 mavi noktanın ve yeşil logonun sürekli görüntülenmesiyle gösterilir. Su basıncı 60-110 PSI'dir.

Basınç Göstergesi: Soldan sağa yanıp sönen 4 mavi noktayla ve sürekli olarak yeşil bir logoyla gösterilir. Su basıncı 60-110 PSI'dir.

DIY Basıncı: logonun yavaş kararan görüntüsüyle belirtilir. Su basıncı 10-110 PSI'dir. Bu basınçla 8 su basıncı seviyesini destekler. Yanıp sönen nokta 1 seviyeli su basıncını, sürekli görüntülenme nokta ise 2 seviyeyi gösterir.

DIY Basıncı Yapılandırması: Herhangi bir durumda, DIY Basıncı yapılandırmasına girmek için mod düğmesini 1 saniye basılı tutun. Logo göstergesi hızla yanıp sönmeye başlayacaktır. Mod düğmesine her dokunulduğunda su basıncı 1 adım artar. İsteddiğiniz su basıncını ayarladıktan sonra mod tuşunu 1 saniye basılı tutarak veya 5 saniye hiçbir tuşa basmayarak ayarları onaylayın.

Bu cihaz su deposu ışıkları ile donatılmıştır. Çalışma sırasında tank mavi renkte yanacaktır.

4.Adım: Kullanmadan Önce

Cihazı kullanmadan önce lavabonun üzerine hafifçe eğilin, başlığı ağzınıza doğru uzatın ve, diş etlerine veya dişlerin arasına doğrultun. Su çıkış yönünü ağzınızın temizlemek istediğiniz kısma dik olacak şekilde ayarlamak için başlığı döndürün. Suyun dışarı akmasını sağlamak için ağzınızın yeterince açın.

Not:

Ağız Duşu cihazını ilk kez kullanırken en düşük basınçla başlayın. Ağız boşluğu uyum sağladıkça su basıncı kademeli olarak artırılabilir. Kullanım sırasında kaşıntı veya hafif diş eti kanaması yaşayabilirsiniz. Bu normaldir ve genellikle 1-2 hafta sonra durmalıdır.


5.Adım: Kullanmak esnası

Cihazı başlatmak için çalıştırma butonu 1 saniye basılı tutun. Kullanım sırasında cihazı duraklatmak için geçiş düğmesine dokunun. Çalışmaya devam etmek için düğmeye tekrar basın ve basılı tutun. Bu cihaz aşağıdakilerle donatılmıştır:

120 saniyelik kapatma zamanlayıcısı. Otomatik kapanma yalnızca su deposu boşsa tetiklenir. Cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, kapatma düğmesine dokunarak kapatın ve su haznesini yeniden doldurduktan sonra cihazı yeniden başlatın. Kullanmayı bitirdikten sonra cihazı kapatın.


Teknikler

En iyi sonuçları elde etmek için, azı dişlerinden (arka dişler) başlayın ve ön dişlere doğru temizlemeye başlayın. Temizlerken başlığı diş eti çizgisi boyunca 90° hareket ettirin. Her dişin arasında kısa bir süre kalın. Suyun dışarı fırlamasını önlemek için dudaklarınızı hafifçe kapatın, ancak suyun ağzınızdan lavaboya serbestçe akabilmesi için yeterli şekilde ağzınızı açın.

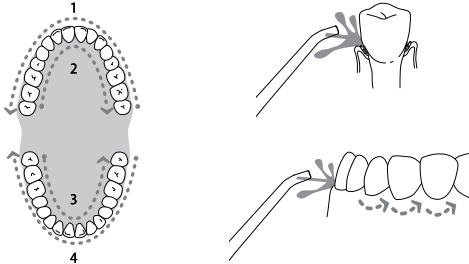

6.Adım: Kullanım sonrası

Kullandıktan sonra su haznesini açın ve kalan sıvıyı boşaltın. Cihazı açın ve cihaz tüm kalan sıvıyı dökene kadar titreşimini açın, ardından cihazı kapatın.

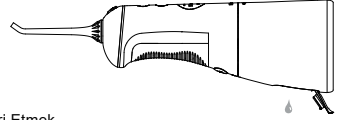

7.Adım: Şarj Etmek

Kullanım sırasında, pil dolduğunda pil göstergesi yeşil renkte yanar, pil normal olduğunda mavi renkte yanar ve pilin şarj edilmesi gerektiğinde kırmızı renkte yanıp söner. Şarj sırasında pil göstergesi, şarj edilen miktara bağlı olarak kırmızı, mavi veya yeşil renkte görünür. Cihaz tamamen şarj edildikten sonra pil göstergesi sürekli yeşil renkte yanacaktır.

IV. Temizlik ve Bakım

Ürün gövde temizliği:

1. Bu cihazı yalnızca temiz su veya hafif bir deterjanla temizleyin. Aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın herhangi bir parçasını temizlemek için 50°C'nin üzerinde su kullanmayın; bunlar, hasara veya performansın düşmesine neden olabilir.
2. Ağız duşu suya batırmayın. Gerekirse cihazın yüzeyini yumuşak, aşındırıcı olmayan deterjana batırılmış yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

Hazne Temizliği:

1. Cihaz gövdesini sol elinizle, su haznesini ise sağ elinizle tutun. Hazneyi çıkarmak için saat yönünde döndürün ve ardından aşağı çekin.
2. Hazneyi temiz oda sıcaklığındaki suyla durulayın. herhangi bir deterjanla temizlemeyin.
3. Temizledikten sonra su haznesi saat yönünün tersine çevirerek yeniden takın.

kireçlenen Su gidermesi



1. Kullanılan suyun mineral içeriğine bağlı olarak cihaz üzerinde sert birikintileri oluşabilir. Bu birikimlerinin giderilmemesi ürün performansını düşürecektir.

2. Başlığı lavaboya doğrultun, cihazı açın ve suyun tamamı kullanılıncaya kadar çalıştırın. Su haznesini temiz ılık suyla doldurun ve ardından hazneyi temizlemek için yukarıdaki adımları tekrarlayın. Ürün performansının korunması için bu temizleme işleminin 1-3 ayda bir tekrarlanması gerekir.


V. Çevresel koruma

1. Pil Bakımı

- İlk kullanımdan önce pilin tamamen şarj olduğundan emin olun.
- Cihazı uzun süre saklamadan önce pilin tam şarjlı olduğundan emin olun.
- Pil ömrünü uzatmak için pil azaldığında cihazı hemen şarj edin.

2. Pil Geri Dönüşümü

Bu cihaz, geri dönüştürülebilir şarj edilebilir piller kullanmaktadır. Cihazın ömrü sona erdiğinde, lütfen cihazı atmadan önce yerel atık yönetim düzenlemelerine uygun bir şekilde pilleri ayrı olarak geri dönüştürün veya imha edin.

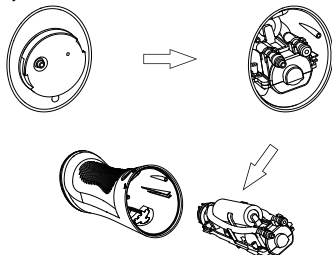

Geri Dönüşüm Prosedürü: Cihaz kapalıyken başlığı ve su tankını çıkarın, ardından geri dönüştürülebilir pilleri çıkarmak için tabanı bir tornavida veya benzeri bir alet kullanarak açın.

(Not: Çıkarılan pilin artı ve eksi terminallerini kısa devre yapmayın. Terminaller bantla yalıtılabilir.)

VI. Sorun Giderme

Sorun	Nedeni	Çözümü
Başlık (Uç) ile gövde arasında sızıntı var	Uç tutucusunun contası hasarlı veya uç düzenli takılmamış	Onarım için satıcıyla iletişime geçin veya ucu (başlığı) uygun konuma yeniden takın
Su girişinde sızıntı var	Conta hasarlı veya girişte yabancı maddeler var	Onarım için satıcıyla iletişime geçin
Su haznesinde sızıntı var	Conta hasarlı	Contayı değiştirin veya onarım için satıcıyla iletişime geçin
Yeterli su basıncı yok	Yeterli şarj edilmemiş	Cihazı şarj ettikten sonra tekrar deneyin
Cihaz başlatılmıyor	Yeterli şarj edilmemiş	Cihazı şarj ettikten sonra tekrar deneyin, veya onarım için satıcıyla iletişime geçin
Cihaz su göndermiyor	Cihaz ilk kez kullanılıyor veya uzun süredir kullanılmıyor	Uç deliğine uygun miktarda su ekleyin ve ucu yeniden taktıktan sonra tekrar deneyin.

Sorunu yukarıdaki sorun giderme talimatlarıyla çözemediyseniz lütfen cihazı satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin veya belirlenmiş bir satış sonrası onarım noktasını ziyaret edin..

VII. Tehlikeli maddeler

Tehlikeli Maddelerin Adı ve İçeriği:

Bileşen Adı	Tehlikeli Madde veya Element					
	Lead(Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)
Plastik Bileşenler	○	○	○	○	○	○
Donanım	○	○	○	○	○	○
Elektrikli Makine Bileşenleri	○	○	○	○	○	○
Devre Kontrol Bileşenleri	X	○	○	○	○	○
Şarj Bileşenleri	○	○	○	○	○	○
Aksesuarlar	○	○	○	○	○	○

Bu form Elektronik Bilgi Ürünlerinden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolüne İlişkin İdari Tedbir (SJT/11364) uyarınca hazırlanmıştır.

O: Bu bileşendeki tüm homojen malzemelerdeki tehlikeli maddelerin GB/T 26572 raporlama gereklilikleri kapsamında olduğunu belirtir.

X: Bu bileşendeki en az bir homojen malzemede tehlikeli maddelerin, GB/T 26572 raporlama gerekliliklerinin üzerinde olduğunu belirtir.

"X" ile işaretlenen bileşenler, küresel teknolojikteki mevcut sınırlamalar nedeniyle bu elementlerin veya maddelerin çevre dostu alternatiflerle tamamen değiştirilmesini gerçekleştiremeyeceğini göstermektedir. Daha sonraki teknolojik gelişmelerle bu durum değişebilir.

10 Yıllık Çevre Koruma Kullanım Süresi: Bu cihazın içerdiği tehlikeli maddelerin normal kullanım sırasında dışarı çıkıp sağlığa ve çevreye olası zararları yol açabilmesi için 10 yıllık bir sürenin bulunduğunu belirtir.

Takip Ok Sembolü: Bu cihazın geri dönüştürülebileceğini belirtir. Bu cihaz, son kullanma tarihi geçtikten sonra veya tamir edilemediğinde ve normal kullanıma döndürülmelerinde atılmamalıdır. Lütfen bu cihazı uygun bir geri dönüşüm tesisine veya atık elektrikli ve elektronik ekipmanların imhası konusunda yetkili kuruluşu teslim edin. Doğru imha yöntemi için lütfen eski elektrikli ve elektronik ürünlerin imhasına ilişkin ulusal veya yerel yönetmeliklere inceleyin.

Yukarıdaki semboller, Elektronik Bilgi Ürünlerinden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolüne İlişkin İdari Tedbir (SJT/11364) uyarınca uygulanmıştır. Bu cihazın uzun süreli kullanımı insan vücuduna herhangi bir zarar vermez.

VIII. Satış sonrası servisler

Nicefeel ağız duşu cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen aşağıdakileri aklınızda bulundurun.

1. Bu cihazı satın aldığınızda satıcıdan garantinin olarak geçerli bir satış sertifikası vermelerini isteyin.
2. Ulusal düzenlemelere uygun olarak bu cihaz 1 yıllık bir kullanım ömrüne sahiptir.

Kullanıcı hatasından kaynaklanmayan arızalar için ücretsiz garanti süresi. Bu garanti uçları(başlıkları) kapsamaz. Garanti süresinin aşılması durumunda cihaz, ücretli bakım için belirlenen satış sonrası noktalara gönderilebilir.

3. Aşağıdaki durumlarda garanti süresi boyunca ücretler ve servis ücretleri geçerli olabilir..

- ◆ Cihaz, tüketici tarafından uygunsuz kullanım, bakım veya saklama nedeniyle hasar görmüştür.
 - ◆ Cihaz "üç garanti"yi taahhüt etmeyen bir servis tarafından hasar gördü.
 - ◆ Satış kuponu geçerli değil veya son kullanma tarihinin üzerinden bir yıl geçti.
 - ◆ Cihaz ticari kullanım sırasında hasar görmüştür.
- Cihaz doğal sebeplerden dolayı (yıldırım, deprem veya yangın gibi) hasar görmüştür.

4. Lütfen aşağıdaki formu dikkatlice doldurup, onarım gerektiren cihazla birlikte belirlenen satış sonrası bakım noktasına gönderin.

Garanti Onarım Kaydı

Müşteri Adı		Gsm	
Model No.		Renk	
Satın alma tarihi		Satıcı	
mail adresi			
Onarım tarihi			

技术要求:

- 1.尺寸: 80x125mm (± 2 mm)
- 2.材质: 80g书写纸 骑马钉装
- 3.印刷: 单黑
- 4.材料符合ROHS/REACH