



Nicefeel®

Şarjlı Ağız Duşu

Kullanım Klavuzu

Model No.: FC163

İthalatçı:
NICEPRO GIDA TEKS.İNŞ.KUR.HİZ.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
Adress: ALLEBEN MAH. ÇAL SK. NO: 16/A Şahinbey/ GAZİANTEP /TÜRKİYE
Phone: 903427770708 Fax: 903427770708 Web Sitesi: www.nicepro.com.tr
E-Post: trade@nicepro.com.tr
Vergi N. : 1780688220/ GAZİKENT

FLY CAT ELECTRICAL CO.,LTD.
Bldg 28th, Rm. 101-401 and Bldg 30th, Rm.
101,301&401, Longwangmiao Industrial Park, Baishixia
East Community, Fuyong Town, Bao'an District,
Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)0755-2729-8495 Fax: 0755-2727-3346
Website: www.fly-cat.com.cn

İçindekiler

önemli güvenceler	Important safeguards	01
Ürün yapısı	Product structure	04
Ürün talimatları	Product instructions	06
Jet uçlarına giriş	Introduction to the jet tips	11
Temizlik ve bakım	Cleaning and maintenance	13
ortak sorunlar ve çözümleri	Common problems and solutions	15
garanti açıklaması	Warranty description	16

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Elektrikli ürünleri kullanırken, özellikle çocukların yanındayken temel güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere her zaman takip edilmelidir:
**KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI
OKUYUN**

TEHLİKE– Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

1. Bu ürünü kullandıktan hemen sonra fişini çekin.
2. Banyo Esnasında kullanmayın.
3. Ürünü düşebileceği veya çekilebileceği yerlere koymayın veya saklamayın.
4. Suya veya başka bir sıvıya koymayın
5. Suya düştüğünde dokunmayın. Derhal fişini çekin.

UYARI – Yanık, elektrik çarpması,veya kişilerin yaralanması riskini azaltmak için..

1. Bir ürün prize takılıyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
2. Bu ürün çocuklar veya engelli kişiler tarafından, bunların üzerinde veya yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
3. Bu ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlanan kullanım için kullanın. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen eklentileri kullanmayın.
4. Kablosu veya fişi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş, hasar görmüş veya suya düşmüşse bu ürünü asla çalıştırmayın. Ürünü inceleme ve onarım için bir servis merkezine gönderin.
5. Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
6. Ürünün hava deliklerini kesinlikle kapatmayın ve ürünü yumuşak yüzeylere yatak, koltuk gibi yüzeylere koymayın.
7. Uyurken veya uykuluyken asla kullanmayın.
8. Hiçbir açıklığa veya hortuma asla herhangi bir nesne düşürmeyin veya sokmayın.

Ürün Yapısı

9. Doldurmadan önce bu ürünün fişini çekin. (hazneyi) yalnızca suyla doldurun, Aşırı doldurmayın.


10. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaya tasarlanmamıştır.

11.Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.

12. Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.

13. Açık havada kullanmayın veya (sprey) ürünlerinin kullanıldığı veya oksijenin uygulandığı yerlerde çalıştırmayın.


14. Bu cihazı, cihazda veya şarj cihazında belirtilen voltaj sisteminden farklı bir voltaj sistemine takmayın. 14..Yalnızca evde kullanım içindir. Ürünü açık havada KULLANMAYIN.

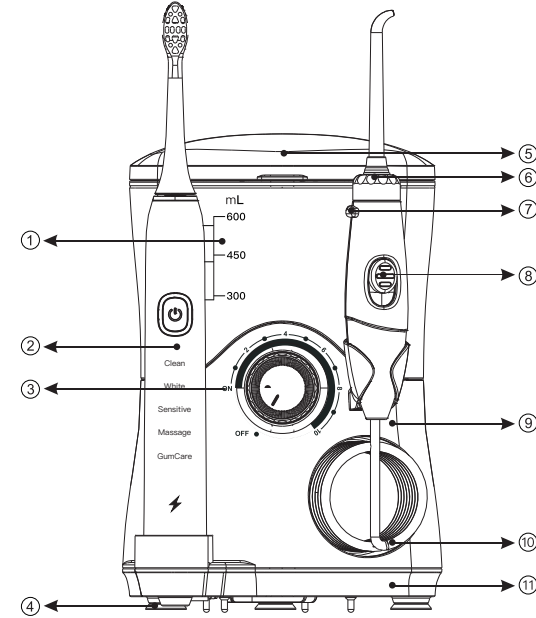

1. Su Haznesi
2. Elektrikli diş fırçası
3. OFF/ON
4. Emici
5. Hazne Kapağı
6. 360° Dönebilen Uç tutucu
7. Uçları Çıkarıp takma kilidi
8. Çalıştırma Butonu
9. Ürün gövdesi
10. Hortum
11. Ana vantuz

2. Elektrikli diş fırçası
4. Emici
6. 360° Dönebilen Uç tutucu
8. Çalıştırma Butonu
10. Hortum

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

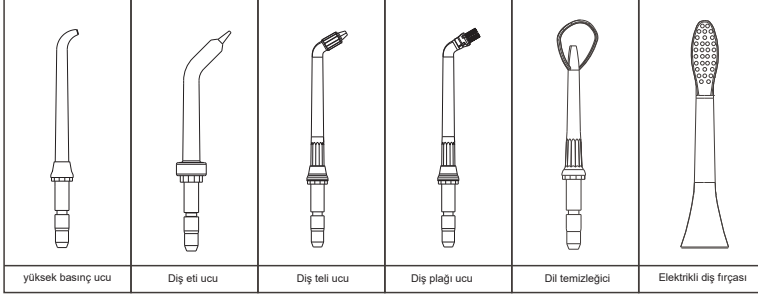

Yüksek basınç ucu: 3 renkli halka. Hijyenik amaçlıdır. 3 kişi tarafından kullanılması tavsiye edilir (aile paketi).


Diğer 4 özel uç ise:

Diş eti ucu	X1
Diş teli ucu	X1
Diş plağı ucu	X1
Dil temizleme ucu	X1
Elektrikli fırça ucu	X2

Yıkama Cihaz Talimatı


Talimatlar

Prizi takın. Priz bir duvar anahtarı tarafından kontrol ediliyorsa, anahtarın açık olduğundan emin olun.

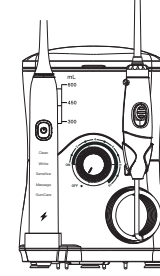


Hazne Hazırlamak

Kapağı ve hazneyi çıkarın, hazneyi doldurun, hazneyi tekrar tabana yerleştirin ve sıkıca kapağı takın

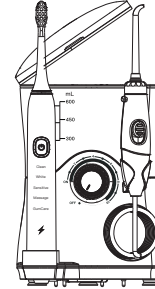


Uçlar takma ve çıkarma işlemi

dental jet kolunun üst kısmındaki düğmenin ortasına yerleştirin; uç doğru şekilde yerine kilittendiğinde, renkli halka düğmenin ucuyla aynı hizada olacaktır. Ucu saptan çıkarmak için jet ucu çıkarma düğmesine basın ve ucu saptan çekin.

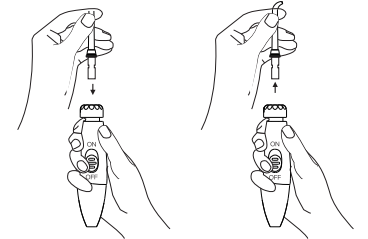


Basınç Seviyesini Ayarlama

"Tık" sesini duyduğunuzda anahtar açıldı demek oluyor, basıncı küçükten büyüğe ayarlamak için saat yönünde çevirin. Cihaz her işlemin ardından 3 dk bitirdiğinde otomatik olarak duracaktır. Bir dahaki sefer cihazı açmak istedinizde yineden "tık" sesini duyana kadar geriye almanız gerekir.

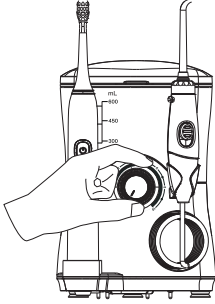


Ağız Duşu Kullanımı

Lavaboya doğru eğilin ve jet ucunu ağızınıza yerleştirin. Ucu dişlere doğru yönlendirin. serbest elinizle açma/kapama düğmesini açın. Basıncı istenilen ayara getirin. Tutamağın üst kısmındaki düğmeyi çevirerek akışı yönlendirin.

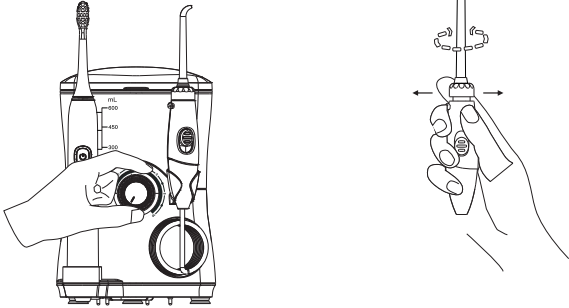


Önerilen Teknikler

Jet akışını diş eti çizgisine 90 derecelik açıyla yönlendirin, sıçramayı önlemek için dudaklarınızı hafifçe kapatın ancak suyun ağızdan lavaboya akması için yönlendirin. En iyi sonuçları elde etmek için azı dişlerinden (arka dişler) ön dişlere doğru ilerleyerek başlayın, jet ucunu diş eti çizgisi boyunca kaydırın ve Dişlerin arasında kısa bir süre duraklayın. Dişlerin etrafındaki ve aralarındaki tüm alanlar temizlenene kadar işleme devam edin.

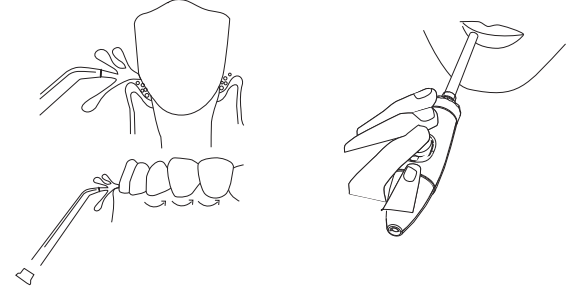


Duraklat Kontrolü

Aşağı kaydırma düğmesini kullanarak akışı istediğiniz zaman geçici olarak durdurabilirsiniz.

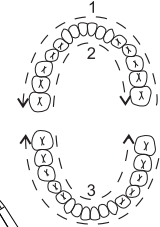

En Son

Cihazı kapatın, haznede sıvı kaldıysa, cihazın fişini çekin

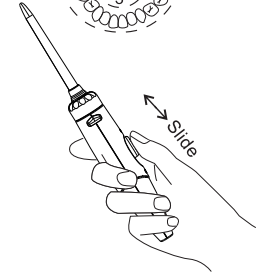

Elektrikli Diş Fırça Kullanma Talimatları

İşlev



■ 2-dk Zamanlayıcı



■ 3-Hafta Bekleme Süresi



■ IPX7 Su Geçirmez



■ Kablosuz Manyetik Şarj



■ 5 Modlu Kullanım Seçeneği



■ Tynex Orijinal Fırça Tüyleri

ŞARJ TALİMATLARI



Şarj etmeye başladığınızda cihazın kapalı olduğundan emin olun. Diş fırçasını şarj yuvasına yerleştirin ve elektriğin bağlı olduğundan emin olun. Şarj göstergesi yanıp sönmeye başladığında şarj olmaya başlamış anlama geliyor. Şarj ışığı yanıp sönmeyi bırakıp sabit yanmaya başladığında şarj işlemi tamamlanmıştır.

Cihazınız uzun süre kullanılmadıktan sonra şarj ettiğinizde şarj göstergesi anında çalışmayabilir. 6-10 dakika sonra tekrar açılacaktır. Diş fırçası 6 aydan uzun süre kullanılmamışsa, tam şarja ulaşması için en az 12 saat şarj edin.


Günde iki kez (sabah ve gece) ve her seferinde iki dakika fırçalarsanız, diş fırçası genellikle tam şarja 21 gün boyunca çalışabilir. Diş fırçası başlığının üç ay sonra değiştirilmesi tavsiye edilir.

Pil Yaşı Uzatma Teknikleri


Cihazı ilk aldığınızda pilin boş olup olmadığını kontrol etmek için cihazı açın.

Şarja başlatıktan sonra 5-7 saat şarja devam etmesi gerekiyor. Yılda en az bir kez cihazı tamamen boşaltın.


Uygulamaya Başlayın

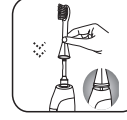


Normal titreşim sağlamak için fırça ucu halkasına yerleştirin, arada belli bir boşluk kalacak şekilde.

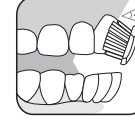


Fırçayı dişlere, diş eti çizgisine doğru 45 derecelik açıyla yerleştirin.

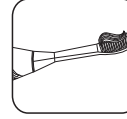


Fırçayı ıslatın ve belirli miktarda diş macunu uygulayın

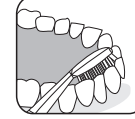

Fırçayı yavaşça dairesel hareketlerle hareket ettirin. hafif bir baskı uygulayın, fırça kendilinden fırçalar

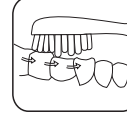


Ağızınıza koymadan önce ıslatın, düğmeyi 3 saniye basılı tutun, diş fırçasını çalıştırın ve ihtiyaçlarınıza uygun dişe uygulamaya başlayın.

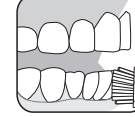

Lütfen fırçaladıktan sonra ağızınızı suyla çalkalayın. Daha sonra diş fırçasını kapatmak için düğmeyi 3 saniye basılı tutun.

BRUSHING TIME

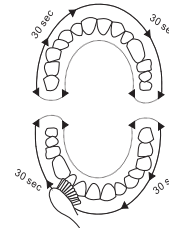

Zamanlayıcı, tam diş hekiminin tavsiye ettiği 2 dakikalık fırçalama için 30 saniyelik aralıklara sahiptir. Her aralıktan sonra size farklı bir alana geçmenizi hatırlatan kısa bir duraklama olur.

5 Mod

Temizleme: 2 dakikalık standart temizlik.
Beyazlatma: Diş tatarnızı etkili bir şekilde temizleyin ve diş etinizi normla rengine dönüştürün.
Hassas dişler: hassas dişler ve diş etleri için.
Masajlama: Etkili diş eti masajı.
Diş Eti Bakımı: Dişlerinize bakım ve derin temizlik yapın.

Jet Uçlar Bilgileri


Diş Eti Ucu

Su veya sıvı oral ilaçları diş etin altındaki belirli yerlere yönlendirebilir.




Yüksek Basınç Ucu

360 derecelik bir aralıkla ağız boşluğunun derin yerlerini diş ipi ile temizler, temizlenmesi zor yerleri, yemek artıklarının ve diş çatlaklarının derinliklerinde veya diş etinin altında bulunan zararlı bakterileri yok etmeye yardımcı olur.

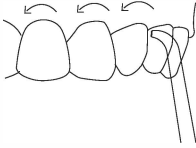


Dil Temizleme Ucu

Ağız duşu Çalıştırmadan önce bu ucu dilin üzerine yerleştirin, dilin yüzeyiyle temas halinde tutarak hafifçe ileri doğru çekerek dilin orta-arka kısmına hafifçe hareketleyin.

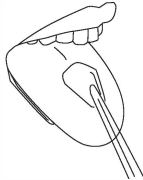

Diş Plağı Ucu


Diş plağı, diş yüzeyine yapışan henüz mineralleşmemiş bir bakteri grubudur. Jet ucu, diş plağının önlenmesinde oldukça etkilidir. Özel kullanımlı diş plağı ucu, diş telleri ve diğer dişçilik cihazlarında ulaşılması zor olan alanların temizlenmesi içindir.

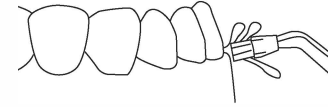

Diş teli Ucu


Özel Ortodonti Ucu, diş telleri ve diğer diş işlemlerinin etrafındaki ulaşılması zor alanları aynı anda fırçalamak için benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır.

Diş teli Ucu kullanmak için lavabonun üzerine eğilin ve diş işlemlerinin etrafını temizlemek için fırça kollarını kullanın. Su, dişler ve diş telleri arasındaki kalıntıları yok eder.

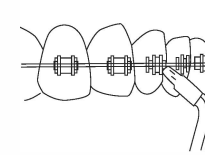

Elektrik Diş Fırçası Ucu

Fırça başlığı, normal diş fırçasından farklı tasarlanmıştır, her dişin yüzeyini, diş içi ve diş eti boşluğu arasında gizlenen plağı iyice temizler ve asla acıtmaz.

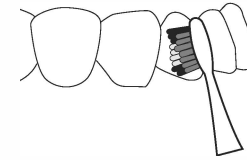

Ürün Temizliği ve Bakımı

Temizlemek.

Haznedeki herhangi bir özel sıvı kullandıktan sonra, ürünü durulayın.

Hazneyi ılık musluk suyuyla doldurun, jet ucunu lavabonuza doğrultun, ürünü açın ve hazneyi tamame boşaltın. Bu ucun tıkanmasını önleyecek ve ürünü daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacaktır.

Gerektiğinde ürünü aşındırıcı olmayan hafif bir bez kullanarak temizleyin.

Temizlemeden önce lütfen fişini prizden çekiniz.

Jet ucu dondurucu sıcaklıklara maruz bırakmadan önce, hazneyi çıkarın ve tamamen sudan boşaltın.

Ürün Bakımı

1. Ağız duşu kullandıktan sonra, güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun ve hazneyi baş aşağı düz bir yüzey üzerinde, su tamamen kurduğunda, temizlenmiş ve kuru ana ürünle birlikte serin ve kuru bir yere koyun, Uzun süre kullanılmadığında kutusu veya benzeri bir kutuya konulmalıdır.
2. Ürün arızalandığında, ilgili bakım yöntemlerini öğrenmek için satıcıyla iletişime geçebilirsiniz.
3. Şirketin garantisi dışında herhangi bir soruna yol açacak şekilde bu ürünü sökmeyin veya çözmeye çalışmayın.
4. Elektrik kablosu hasar gördüğünde bakım için belirlenmiş servis noktamıza veya ilgili bakım atölyemize gidin. Güç kablosunu değiştirmeyin veya fişi kendiniz takmayın.
5. Ürün garanti süresi dışındaysa, onarım hizmeti de vereceğiz, uygun malzeme maliyetini ve az miktarda işçilik maliyetini talep edeceğiz.

Elektrikli Diş Fırçası temizliği ve bakımı

Bakım Talimatları




Fırça başlığı temizlemek

Her fırçalamadan sonra kalıntıları gidermek için durulayın ve havayla kurumaya bırakın. Bozulmayı önlemek için kılları ovalamayın.



Kolu Temizleyin

Her fırçalamadan sonra kalıntıları gidermek için durulayın ve yumuşak bir bezle kurulayın. Diş fırçasını suya batırmayın. Diş fırçasını 40 C'den yüksek suyla veya aşındırıcı temizleyicilerle temizlemeyin.

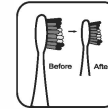

Fırça Başlığını Değiştirin

Diş hekimi, en iyi fırçalama sonuçları için fırça başlığınızı her 3 ayda bir değiştirmenizi önerir. Ayrıca kıllar dışarı doğru bükülmeye başladığında fırça başlığını değiştirin.

Yaygın Sorunlar ve Çözümleri

Sorun	Nedeni	Çözümü
Jet Uçlar ve Dil Temizleyici ucu Üst ve Kol Düğmesi Arasında Sızıntı	Uç tam olarak takılı değil	Ucu çıkarın ve yeniden takın
Diş eti yumuşak uç kısmında yırtık	Uç eskimiş	Yeni ucla değiştirin
Ağız duşu Taban hortumunun sapa kadar sızıntısı var	Hortumun hasar görmesi	Satıcı tarafından değiştirilebilir
Hazne sızıntısı	Su haznesi kapağı eksik yada ters çevrilmiş	Hazneyi Değiştirin (satıcıyla iletişime geçin); hazneyi sağ tarafa doğru çevirin
Yetersiz Basınç	Hazne Değil	Prizin çalıştığından emin olun, başka bir cihazla test edin (duvar anahtarını kontrol edin)
Ürünün su çıkışı arızalı	Hazne Düzgün konumlandırılmış, Motor çalışmıyor	hazneyi düzgünce takın
Titreşim Zayıflamış	1. Uç çok sert bastırılmış 2. Fırça başlığı çok sıkı sabitlenmiş	1. Uçları çok fazla kuvvetle bastırmayın 2. Fırça kafasını tahrik miline yeniden takın ve aralarında belirli bir boşluk kalacak şekilde sabitlendiğinden emin olun.
Diş fırçası kısa süre çalışıyor	1. Diş fırçasının 6 aydan uzun süredir kullanılmaması olması 2. Uygun olmayan şarj kullanma 3. Yetersiz şarj süresi	1. Diş fırçasının şarj yuvasına dikey olarak yerleştirildiğinden ve şarj adaptörü takılı olduğundan emin olun. 2. Gösterge anlık yanıp söne kadar şarj edin
Diş Fırçası hiç çalışmıyor durumda	1. İç mekanik arıza 2. Pil neredeyse ömrünü doldurdu	Daha fazla inceleme için satıcıyla iletişime geçin

Garanti Açıklaması

Ağız Duşu satın aldığınız için teşekkür ederiz! Lütfen garanti kapsamında geçerli bir satış makbuzunu saklayın:

1. Bu ürün, devletin ilgili hükümlerine göre: 1 yıl boyunca kişiler tarafından zarar verilmediği sürece ürünü onarmak ücretsizdir.

2. Garanti süresi boyunca maliyet ve servis ücretleri uygun şekilde tahsil edilecektir.

- Tüketicilerin kullanım, bakım, uygunsuz depolamadan kaynaklanan zararları;
- Üç paket onarım hasarını onarma taahhüdünde bulunmamak;
- İlgili satış fişinin bulunmaması ve bir yıldan fazla üretim tarihi hasarının olması;
- Zarar vermek amacıyla ticari amaçla kullanılan; doğal afetler. (Yıldırım, deprem, yangın vb.)

3. Lütfen doldurun! Aşağıdaki formu dikkatlice doldurun: Şirketimizin belirlediği bakım yerine geri gönderin.

**GARANTİ BELGESİ**

Ürün	
Model No.	
Satın alma tarihi	
Ad	
Cep telefon	
Adrs	
Arıza Açıklaması	

Lütfen bilgilerinizi dikkatlice doldurup, kartı ürünüyle birlikte teknik merkezimize gönderiniz.

技术要求:

- 1.尺寸: 120x150mm (± 2 mm)
- 2.材质: 80g书写纸 骑马钉装
- 3.印刷: 单黑
- 4.材料符合ROHS/REACH