

NPO Nicefeel Ağız Duşu Cihazı Satın Aldığınız İçin Teşekkür Ederiz.

Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip öncü ve yenilikçi markası NPO Nicefeel'den portatif ağız duşu satın aldığınız için teşekkür ederiz. yüksek basınçlı su titreşim teknolojisi. Geleneksel diş fırçaları ağız boşluğunda saklanan yemek artıklarını kolayca çıkaramazken çoğu diş ipi diş etinin altında yalnızca sınırlı bir alana ulaşabilir. Buna karşılık, Nicefeel ağız duşları, mükemmel hijyen sağlamak için diş etlerinin derinliklerindeki ve dişlerin arasındaki yemek artıklarını hızlı ve etkili bir şekilde temizleyebilir.

İthalatçı:

NICEPRO GIDA TEKS.İNŞ.KUR.HİZ.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

Adress: ALLEBEN MAH. ÇAL SK. NO: 16/A Şahinbey/
GAZİANTEP /TÜRKİYE

Phone: 903427770708 Fax: 903427770708 Web Sitesi:

www.nicepro.com.tr

E-Post: trade@nicepro.com.tr

Vergi N. : 1780688220/ GAZİKENT

Üretici:

Fly Cat Electrical Co., Ltd.

101-401 Building 28; 101, 301, 401 Building 30; Longwangmiao Industrial
Zone, East District, Baishixia Community, Fuyong Street, Baoan District,
Shenzhen

Tel: 0755-2727-3346

Website: www.fly-cat.com.cn




Nicefeel®

Taşınabilir Ağız Duşu

**Kullanım Kılavuzu ve
Garanti Belgesi**

Model: FC5170

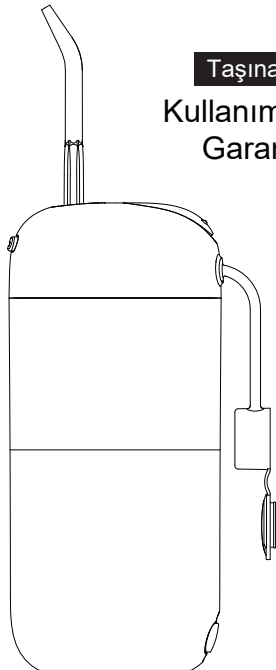

Nicefeel Ağız Duşunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz!

Daha hijyenik bir yaşamaya doğru ilerliyorsunuz!

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Elektrikli ürünleri kullanırken, özellikle de çocukların yanındayken, aşağıdakilerde temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

TEHLİKELER-Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

1. Duş esnasında kullanmayın
2. Ürünü düşebileceği veya duş kabineye, lavaboya çekilebileceği yerlere koymayın veya saklamayın.
3. Suya veya başka bir sıvıya koymayın ve düşürmeyin.
4. Suya düşen ürüne dokunmayın. Derhal fişini çekin.
5. Şarj sırasında şarj cihazını ıslak elinizle tutmayın.

UYARI- Elektrik çarpması, yangın veya kişilerin yaralanması riskini azaltmak için.

1. ürünü fişe takılıken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
2. Bu ürün çocuklar veya engelli kişiler tarafından kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
3. Bu ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlanan kullanımı için kullanın. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen eklentileri kullanmayın..
4. Kablosu veya fişi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse veya suya düşmüşse bu ürünü asla çalıştırmayın. Ürünü inceleme ve onarım için bir servis merkezine gönderin.
5. Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
6. Ürünün hava deliklerini asla kapatmayın veya hava açıklıklarının tıkanabileceği yatak, kanepa gibi yumuşak bir yüzeye yerleştirmeyin. ürünün açıklıklarını tüp, saç ve benzeri maddelerden uzak tutun.
7. Uyurken veya uykuluyken asla kullanmayın.
8. Hiçbir açıklığa veya hortuma asla herhangi bir nesne sokmayın.
9. Doldurmadan önce bu ürünün fişini prizden çekin. Aksi belirtilmedikçe (hazneyi) yalnızca suyla doldurun, Aşırı doldurmayın (veya doldurma talimatlarını okuyun).
10. Bu cihaz fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan (çocuklar dahil) kişiler tarafından kullanmaya tasarlanmamıştır. Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmediği süreç.

11. Çocukların cihazı kullanmalarını sağlamak için gözetim altında bulundurulmalıdır.
12. Aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijen verilen yerlerde kullanmayın veya çalıştırmayın.
13. Bu ürünün üretici tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj edilmesi gerekmektedir, belirtilmeyen şarj cihazını veya başka bir şarj cihazını kullanmayın.
14. Şarj cihazı üzerinde belirtilen voltaj sisteminde farklı bir voltaj sistemine takmayın.
15. Yalnızca cihazın üzerindeki işarete uygun, güvenli, ekstra düşük voltaja beslenmelidir.
16. Bu cihaz değiştirilemeyen piller içermektedir.
17. Yalnızca evde kullanım içindir. Ürünü açık havada KULLANMAYIN.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

FCC STATEMENT

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2). ise istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Uyarı: Bu üründe, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

NOT: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmazsa radyo iletişimde zararlı girişime neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda girişimin meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Ekipman, radyo veya televizyon yayın alımında, cihazın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilecek zararlı girişime neden oluyorsa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını uygulayarak girişimi düzeltmeye çalışması teşvik edilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Güvenlik önlemleri

Elektrikli ürünlerin kullanımı sırasında, özellikle çocukların yanındayken temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

Lütfen bu cihazı kullanmadan önce tüm güvenlik yönergelerini okuyun.

Uyarı: Elektrik çarpması ve diğer tehlike riskini azaltmak için lütfen aşağıdaki güvenlik yönergelerine uyun:

1. Bu cihazın ilk kullanımından önce ve devamı sırasında şarj cihazının veya güç kablosunun hasar görüp görmediğini kontrol edin. Herhangi bir hasar gördüyseniz cihazı kullanmayın. Bunun yerine, değişim için satıcıyla iletişime geçin.
2. Cihazı ateşe veya diğer sıcak ortamlara atmayın.
3. Hasara neden olabileceğinden cihazı suya batırmayın.
4. Ellerinizi ıslakken şarj cihazını takıp çıkarmaya çalışmayın. Cihazı takarken veya çıkarırken, bunu güç kablosunu değil, şarj cihazın fişini kullanın.
5. Şarj cihazında değişiklik yapmayın, hasar vermeyin veya imha etmeyin. Güç kablosunu zorla germeyin, bükmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın veya güç kablosunu diğer nesnelerin arasına yapıştırmayın.
6. Cihazın herhangi bir açıklığına yabancı cisim düşürmeyin veya sokmayın.
7. Cihazı, şarj cihazını veya güç kablosunu ısıtılmış yüzeylere koymayın.
8. Cihazı sıcak, nemli veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere koymayın.
9. Temizlik ve bakım öncesinde cihazın kapalı olduğundan ve şarj olmadığından emin olun.

Uyarı: Yanık, elektrik çarpması, yangın ve diğer yaralanma tehlikelerini azaltmak için lütfen aşağıdaki güvenlik yönergelerine uyun.

1. Bu cihazı kılavuzda belirtilenlerin dışında herhangi bir şekilde kullanmayın.
2. Uç (başlık) takılı değilken bu cihazı kullanmayın.
3. Tam zihinsel kapasiteye veya ilgili deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil), gözetimi altında olmadan kullanmalarına izin vermeyin.
4. Bu cihazı çocukların ve bebeklerin erişemeyeceği bir yere yerleştirin. Ayrıca, oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin.
5. Periodontitis hastası olan veya son 2 ay içinde ağız ameliyatı geçirmiş olan kullanıcılar, bu cihazı kullanmadan önce bir doktora danışmalıdır.
6. Yalnızca bu cihazla birlikte verilen, satılan veya önerilen uçlar ve aksesuarlar kullanılmalıdır.
7. Bu cihazın parçalarını sökmeyin veya değiştirmeyin.
8. Yanıkları önlemek için hazneyi 40°C'nin üzerindeki suyla doldurmayın.
9. Bu cihazı ağız hijyeni dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
10. yaralanmayı önlemek için başlığı diş etlerinize veya dişlerinize sert şekilde bastırmayın.
11. Bu cihazı, aerosollerin (spreylerin) veya oksijen kaynaklarının kullanıldığı dış mekanlarda kullanmayın.
12. Bu cihazı kullanmadan önce tüm kozmetik diş aksesuarlarını çıkarın.
13. Bu cihazda iyot, tuzlu su veya suda çözünmeyen konsantre uçucu yağlar kullanmayın. Aksi takdirde performansı düşecek ve hizmet ömrü kısalmaktadır.
14. Cihazı saf gargara sıvısıyla doldurmayın. Gargara kullanacaksanız uygun oranlara göre sulandırınız.


Bu Kılavuzu Saklayınız!

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları	01-02
FCC Beyanı	02
Güvenlik önlemleri	03-04
İçindekiler	05
I. Paket içeriği	06
II. Aksesuarlar ve Özellikler	07-08
III. Aıştırma Adımları	08-12
IV. Temizlik ve Bakım	12-13
V. Çevresel Koruma	13
VI. Sorun Giderme	14
VII. Tehlikeli Maddeler	15
VIII. Satış Sonrası Servisi	16


Bu kılavuzun içeriğinde herhangi bir yazım hatası veya yanlış anlama olması durumunda son yorumlama hakkını saklı tutuyoruz. Cihaz yükseltmeleri ve güncellemeleri, önceden haber verilmeden kılavuzun yeni bir sürümüne dahil edilecektir. Ürünün görünümü ve rengi ambalajlı modele bağlıdır ve bu kılavuzda yer alan açıklamalara ilişkin resimlerden önceliklidir..

I. Paket İçeriği

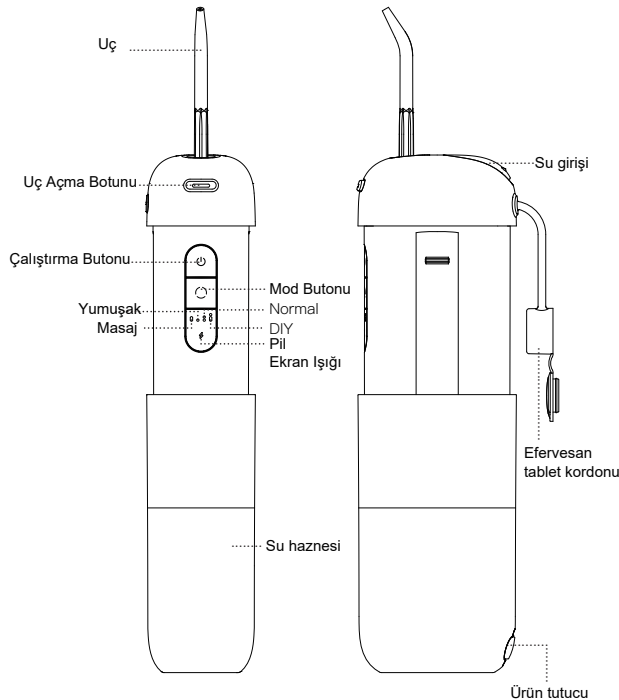

II. Aksesuarlar ve Özellikleri

Ürün Aksesuarları:

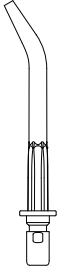

Uç x2



Güç kablosu x1

Aksesuarlar satıcıdan satın alınabilir

Ürün Özellikleri:

Ürün Adı		Nicefeel Ağız Duşu
Ağız Duşu	Model No.	FC5170
	Voltaj değeri	3.7V ===
	Güç değeri	8W
	Su geçirmezlik seviyesi	IPX7
	Şarj Süresi	≤3.5h
	Giriş Güç değeri	5V===1A
	Adaptör değerlendirilmesi	Input: 100-240V~50/60Hz 0.3A Output: 5V===1A 5.0W
Menşei		Çin

Talimatlar:

Nicefeel ağız duşu 2 standart uçla birlikte gelir, Ek Uç satın almak istiyorsanız Nicepro resmi web sitesini veya yetkili satıcıyı ziyaret edin.

her 6 ayda değiştirilmeli	
Standart Uç	Uygulama
	Normal Temizleme

III. Kullanma Adımları


Başlamadan Önce: çok Önemli! USB kablosunu şarj bağlantı noktasına bağlayıp gücü açarak, ilk kez kullanmadan önce cihazın tamamen şarj olduğundan emin olun. Bu cihaz şarja takılıyken kullanılmaz

1.Adım: Efervesan tabletler ekleyin


1.Efervesan tabletin kordonunu Şekil 1'de gösterildiği gibi çözün ve bir efervesan tableti çıkarın.

2.Şekil 2'de gösterildiği gibi gövdeyi sol elinizle tutun ve sağ elinizle efervesan tablet tutucuyu çıkarın.


3.Şekil 3'te gösterildiği gibi, bir parça efervesan tablet alın, tutucuya yerleştirin, efervesan tablet tutucuyu yerine oturtun.

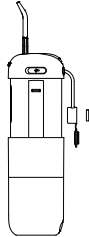

Şekil 1

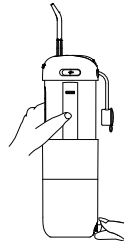

Şekil 2

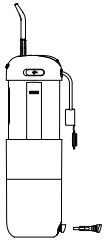


Şekil 3

2.Adım : Su Hazneyi Doldurun


Şekilde görüldüğü gibi su haznenin kapağını açın, su haznesini aşağı doğru çekerek suyla doldurun veya su haznesi gövdeden tamamen ayrılanı kadar aşağı çekin, su deposuna su ekleyin ve köpürmesini bekleyin. tabletin 30 saniye boyunca köpürmesini bekleyin.

Not: Su haznesine su eklerken cihazın kapalı olduğundan emin olun.

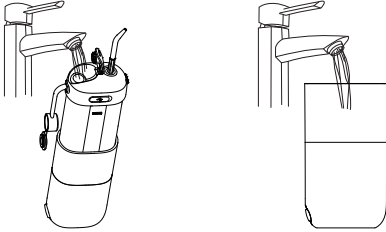

3.Adım : Ucu Takın

Ucu gövdenin üst kısmındaki deliğe yerleştirin. Başarılı kuruluma bir "tık" sesi duymalısınız. Su çıkış yönünü ayarlamak için ucu döndürün. Sulama cihazını değiştirmeniz gerekiyorsa kaldırma düğmesini basılı tutun, ardından sulama cihazını çıkarın.

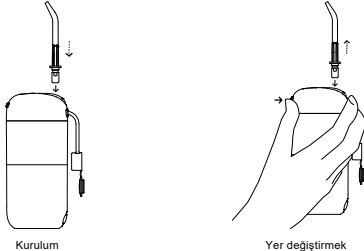


Kurulum

Yer değiştirmek

4.Adım: Modu Seçin

Bu ürünün 4 modu vardır. Mod, güç açık veya kapalıyken ayarlanabilir. Modların işlevleri aşağıdaki gibidir:

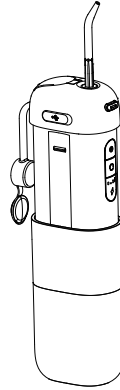

1.Açma/Kapama / Mod düğmesi. Çalışmaya başlamak için güç düğmesine basın. Ürün açıldığında son kapanmadan önce kullanılan modu hatırlar. Dört Masaj-Nazik-Normal-Kendin Yap modu arasında geçiş yapmak için Mod düğmesine basın. Mevcut herhangi bir modu kapatmak için güç düğmesine basın. Kullanıcı basıncı ve modu değiştirip bir kez (3 saniyeden fazla) kullandıktan sonra, Normal, Darbe veya Masaj modu fark etmeksizin son kapatmadan önceki basınç ve modu varsayılan olarak uygular.

2.DIY modunda, DIY modunda su basıncını mod düğmesine basmak için (1 saniye) basın (Su basıncı toplam 8 vitesle ve her vitesle 10PSI artışla otomatik olarak 20'den 100PSI'ye çıkacaktır. Kısa basınç (1 saniye) Mevcut vitesi seçmek için, herhangi bir işlem yapılmadan üç döngü ayarlar çıkacaktır.)

3.Koruma: Durma koruması: Çalışma akımı 5A'den (ölçülen) yüksek olduğunda, 5 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır. Şarj ters bağlantı koruması.

4.Cihaz iki dakika çalışacaktır. Hafıza modu: Cihaz açıkken, siz cihazı kapatmadan önce bir dakikadan fazla süreyle kullandığınız son modu hafızaya alır.

5.Optimum çalışma koşulunda olduğundan emin olmak için kullanım sırasında cihazı sıkı tutun. Cihaz herhangi bir modda 120 saniyeden fazla çalışırsa otomatik olarak kapanacaktır.

5.Adım: Kullanım Öncesi

Cihazı kullanmadan önce lavabonun üzerine hafifçe eğilin, başlığı ağzınıza doğru uzatın ve dişlere, diş etlerine veya dişlerin arasına çevirin. Su çıkış yönünü ağzınızın temizlemek istediğiniz kısma dik olacak şekilde ayarlamak için başlığı döndürün. Suyun dışarı akmasını sağlamak için ağzınızın yeterince açın.

Not:


Ağız Duşu cihazını ilk kez kullanırken en düşük vitesten başlayın. Ağız boşluğu uyum sağladıkça su basıncı kademeli olarak artırılabilir. Kullanım sırasında kaşıntı veya hafif diş eti kanaması yaşayabilirsiniz. Bu normaldir ve genellikle 1-2 hafta sonra durmalıdır.

5.Adım : Kullanım Sırası

Cihazı başlatmak için çalıştırma düğmesine 1 saniye süreyle basın ve kısa süre basılı tutun. Kullanım sırasında cihazı duraklatmak için çalıştırma düğmesine yine kısa süre basılı tutun. Bu cihaz 120 saniyelik bir kapatma zamanlayıcısıyla donatılmıştır. Otomatik kapanma yalnızca su deposu boşsa tetiklenir. Cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, çalıştırma düğmesine dokunarak kapatın ve su haznesini yeniden doldurduktan sonra cihazı yeniden başlatın. Kullanmayı bitirdikten sonra cihazı kapatın.


6.Adım: Teknikler

En iyi sonuçları elde etmek için, azı dişlerinden (arka dişler) ön dişlere doğru temizlemeye başlayın. Temizlerken başlığı diş eti çizgisi boyunca 90° hareket ettirin. Her dişin arasında kısa bir süre kalın. Suyun dışarı fışkırmasını önlemek için dudaklarınızı hafifçe kapatın, ancak suyun ağzınızdan lavaboya serbestçe akabilmesi için yeterli açık bırakın.

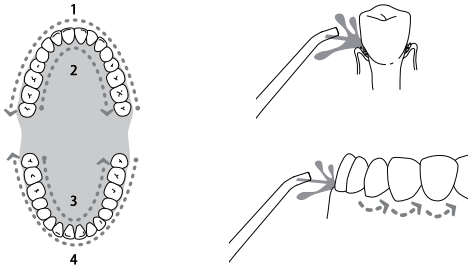

7.Adım : Kullanım Sonrası

Kullandıktan sonra cihazı kapatın ve su haznesini aşağı doğru çekerek ana gövdeden ayırın. Daha sonra su haznesini tamamen temizleyin. Son olarak su hazneyi tekrar ana gövdeye yerleştirin.

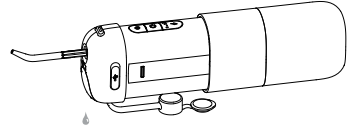

8.Adım : Şarj Etmek

Kullanım sırasında kırmızı gösterge yanıp sönüyorsa, cihazı zamanında şarj etmeniz gerekir. Şarj ederken kırmızı solunum göstergesi yanıp sönmeye devam eder. Cihaz tamamen şarj olduğunda beyaz göstergeler sabit yanar. Şarj sırasında cihazı kullanmayın.

IV. Cleaning and Maintenance

Gövde Temizliği :

1. Bu cihazı yalnızca temiz su veya nötr bir deterjanla temizleyin. Aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın herhangi bir parçasını temizlemek için 50°C'nin üzerinde su kullanmayın; bu, hasara veya performansın düşmesine neden olabilir.

2. Ağız duşu suya batırmayın. Gerekirse cihazın yüzeyini, aşındırıcı olmayan deterjana batırılmış yumuşak bir bezle silerek temizleyin.


Hazne Temizliği

1. Cihazı sol elinizle, su haznesini ise sağ elinizle tutun. Su haznesini çıkarmak için aşağı doğru çekin.

2. Hazne içini oda sıcaklığındaki temiz suyla durulayın. Hazneyi herhangi bir deterjanla temizlemeyin.

3. Su haznesini temizledikten sonra tekrar yerine takın.

Kireçlenen Su Gidermesi

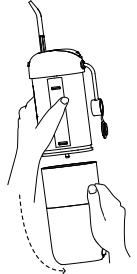

1. Kullanılan suyun mineral içeriğine bağlı olarak cihaz üzerinde sert su birikintileri oluşabilir. Bu birikimlerinin giderilmemesi ürün performansını düşürecektir.

2. Başlığı lavaboya doğrultun, cihazı açın ve suyun tamamı kullanılıncaya kadar çalıştırın. Su haznesini temiz ılık suyla doldurun ve ardından hazneyi temizlemek için yukarıdaki adımları tekrarlayın. Ürün performansının korunması için bu temizleme işleminin 1-3 ayda bir tekrarlanması gerekir.


V. Çevresel koruma

1. Pil Bakım

- İlk kullanımdan önce pilin tamamen şarj olduğundan emin olun.
- Cihazı uzun süre saklamadan önce pilin tam şarjlı olduğundan emin olun.
- Pil ömrünü uzatmak için pil azaldığında cihazı hemen şarj edin.

2. Pil Geri Dönüşümü

Bu cihaz geri dönüştürülebilir şarj edilebilir piller kullanmaktadır. Cihazın kullanım ömrünün sona erdiğinde, lütfen cihazı atmadan önce yerel atık yönetim düzenlemelerine uygun şekilde ayrı olarak geri dönüştürün veya imha edin.

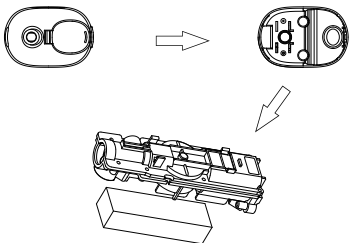

Geri dönüşüm prosedürü: Cihaz kapalıyken başlığı ve su tankını çıkarın, ardından geri dönüştürülebilir pilleri çıkarmak için tabanı bir tornavida veya benzeri bir alet kullanılarak açın.

Not: Çıkarılan pilin artı ve eksi terminallerini kısa devre yapmayın. Terminal bantla yalıtılabilir.

VI. Sorun Giderme

Sorun	Nedeni	Çözümü
Başlık (Uç) ile gövde arasında sızıntı var	Uç tutucusunun contası hasarlı veya uç düzenli takılmamış	Onarım için satıcıyla iletişime geçin veya ucu (Başlığı) uygun konuma yeniden takın
Su girişinde sızıntı var	Conta hasarlı veya girişte yabancı maddeler var	Onarım için satıcıyla iletişime geçin
Su haznesinde sızıntı var	Conta hasarlı	Contayı değiştirin veya onarım için satıcıyla iletişime geçin
Yeterli su basıncı yok	Yeterli şarj edilmemiş	Cihazı şarj ettikten sonra tekrar deneyin
Cihaz başlatılmıyor	Yeterli şarj edilmemiş	Cihazı şarj ettikten sonra tekrar deneyin, veya onarım için satıcıyla iletişime geçin
Cihaz su göndermiyor	Cihaz ilk kez kullanılıyor veya uzun süredir kullanılmıyor	Uç deliğine uygun miktarda su ekleyin ve ucu yeniden taktıktan sonra tekrar çalıştırmaya deneyin.

Sorunu yukarıdaki sorun giderme talimatlarıyla çözemediyseniz lütfen cihazı satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin veya belirlenmiş bir satış sonrası onarım noktasını ziyaret edin.

VII. Tehlikeli maddeler

Tehlikeli Maddelerin Adı ve İçeriği:

Bileşen Adı	Tehlikeli Madde veya Element					
	Lead(Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)
Plastik Bileşenler	○	○	○	○	○	○
Donanım	○	○	○	○	○	○
Elektrikli Makine Bileşenleri	○	○	○	○	○	○
Devre Kontrol Bileşenleri	X	○	○	○	○	○
Şarj Bileşenleri	○	○	○	○	○	○
Aksesuarlar	○	○	○	○	○	○

Bu form Elektronik Bilgi Ürünlerinden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolüne İlişkin İdari Tedbir (SJ/T 11364) uyarınca hazırlanmıştır.

O: Bu bileşendeki tüm homojen malzemelerdeki tehlikeli maddelerin GB/T 26572 raporlama gereklilikleri kapsamında olduğunu belirtir.

X: Bu bileşendeki en az bir homojen malzemedeki tehlikeli maddelerin, GB/T 26572 raporlama gerekliliklerinin üzerinde olduğunu belirtir.

"X" ile işaretlenen bileşenler, küresel teknolojiye mevcut sınırlamalar nedeniyle bu elementlerin veya maddelerin çevre dostu alternatiflerle tamamen değiştirilmesinin gerçekleştirilemeyeceğini göstermektedir. Daha sonraki teknolojik gelişmelerle bu durum değişebilir.



RoHS Sembolu

10 Yıllık Çevre Koruma Kullanım Süresi: Bu cihazın içerdiği tehlikeli maddelerin normal kullanım sırasında dışarı çıkıp sağlığa ve çevreye olası zararlara yol açabilmesi için 10 yıllık bir sürenin bulunduğunu belirtir.

Takip Ok Sembolü: Bu cihazın geri dönüştürülebileceğini belirtir. Bu cihaz, son kullanma tarihi geçtikten sonra veya tamir edilemediğinde ve normal kullanıma döndürülmesinde atılmamalıdır. Lütfen bu cihazı uygun bir geri dönüşüm tesisine veya atık elektrikli ve elektronik ekipmanların imhası konusunda yetkili kuruluşa teslim edin. Doğru imha yöntemi için lütfen eski elektrikli ve elektronik ürünlerin imhasına ilişkin ulusal veya yerel yönetmeliklere inceleyin.

Yukarıdaki semboller, Elektronik Bilgi Ürünlerinden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolüne İlişkin İdari Tedbir (SJ/T 11364) uyarınca uygulanmıştır. Bu cihazın uzun süreli kullanımı insan vücuduna herhangi bir zarar vermez.

VIII. Satış sonrası servisler

Nicefeel ağız duşu cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen aşağıdakileri aklınızda bulundurun.

1. Bu cihazı satın aldığınızda satıcıdan garantiniz olarak geçerli bir satış sertifikası vermelerini isteyin.(Fatura Yeterli bir belgedir.)
2. Ulusal düzenlemelere uygun olarak bu cihaz 1 yıllık bir garantiye sahipken Türkiye'de satılan cihazlar ise kanunlar çerçevesinde 2 Yıl garanti kapsamındadır. (Kullanıcı kaynaklı sorunlar hariç)
Kullanıcı hatasından kaynaklanmayan arızalar için ücretsiz garanti süresi. Bu garanti uçları(başlıkları) kapsamaz. Garanti süresinin aşılması durumunda cihaz, ücretli bakım için belirlenen satış sonrası noktalara gönderilebilir.
3. Aşağıdaki durumlarda garanti süresi boyunca ücretler ve servis ücretleri geçerli olabilir.(Garanti kapsamı dışında kalan bazı durumlar)
 - ◆ Cihaz, tüketici tarafından uygunsuz kullanım, bakım veya saklama nedeniyle hasar gördü ise,
 - ◆ Cihaz yetkili olmayan bir servis yada şahıs tarafından onarıldı ise,
 - ◆ Geçerli bir garanti belgesi yok ise veya son satılma tarihinin üzerinden 2 yıl geçti ise,
 - ◆ Cihaz ticari kullanım için değildir, ticari kullanım sırasında hasar gördü ise,
 - ◆ Cihaz doğal sebeplerden dolayı (yıldırım, deprem veya yangın gibi) hasar gördü ise.
4. Onarım talebiniz varsa, teknik servisimiz ile iletişime geçip aşağıdaki formu dikkatlice doldurup, onarım gerektiren cihazla birlikte size verilen adresimize gönderin.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: Nicepro Gıda Tek. İnş. Kurum Hiz. San Tic. Ltd. Şti Adresi: Allaben mah. Çal Sok. No:16/B Şahinbey/Gaziantep Telefonu: (342)777 07 08 e-posta: info@nicepro.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Teknoraks Teknoloji Market Adresi: Allaben mah. Çal Sok. No:16/B Şahinbey/Gaziantep Telefonu: (342) 230 60 40 e-posta: destek@teknoraks.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi: Water Flosser (Ağız Duşu) Markası: NPO Nicefeel Modeli: FC1596	Garanti Süresi: 2 Yıl Azami Tamir Süresi: 30 Gün Bandrol ve Seri No: Faturasındadır
GARANTİ ŞARTLARI	

- 1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3)Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
- a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayyp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

AÇIKLAMA:

- 1-Garanti belgesi örneği yol gösterici mahiyettedir ve sınırlayıcı bir metin değildir.
2-Garanti belgesi örneği, tüketici ve üretici ya da ithalatçı firmaları bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, üretici ya da ithalatçı firmalar 6502 sayılı Kanun ve Garanti Belgesi Yönetmeliği'ne uygun olmak kaydıyla kendi garanti belgelerini serbestçe düzenleyebilirler.
3-Garanti belgesi örneğinde yer alan hükümler, sadece taraflardan birinin tüketici olduğu satışlar için geçerlidir.

Garanti Onarım Kaydı

Müşteri Adı		Gsm	
Model No.		Renk	
Satın alma tarihi		Satın Alınan Platform	
Mail adresi			
Artza açıldamast			